


TOUCH®

Duo-Mobile
Daumensattelgelenksprothese

Hoch-ernetztes vs. Standard PE*

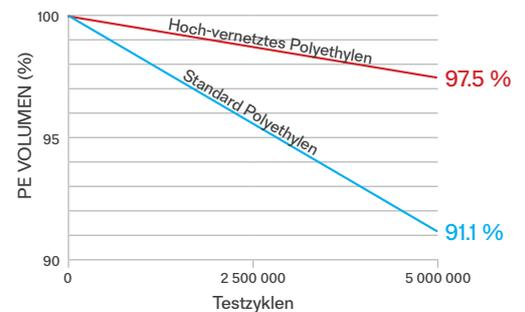

Test* auf 5 Millionen Zyklen
(ca. 10 Jahre regelmäßiger Gebrauch des Daumens)

Hoch-ernetztes PE



*Interne Testung von KeriMedical (110-30A102)
Hinweis: Prüfstandtests sind nicht zwingend ein Hinweis auf die klinische Leistung

Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com

/ SPHÄRISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
- 5 Anti-Rotationsflügel
- Zackenkronen für Stabilität
- Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO09 CTO10

/ KONISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
- Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO109 CTO110

/ HALS GERADE

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
- Material Hals: Edelstahl
- Hals gerade
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO06 NTO08 NTO10

/ HALS ABGEWINKELT

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
- Material Hals: Edelstahl
- Hals abgewinkelt 15°
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO156 NTO158 NTO1510

/ SCHÄFTE


- 6 Schaft-Größen
- Dreifach modulares anatomisches Design
- Material: Titan
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



STOXS STO0 STO1 STO2 STO3 STO4

CE 1250

/ INSTRUMENTEN SET

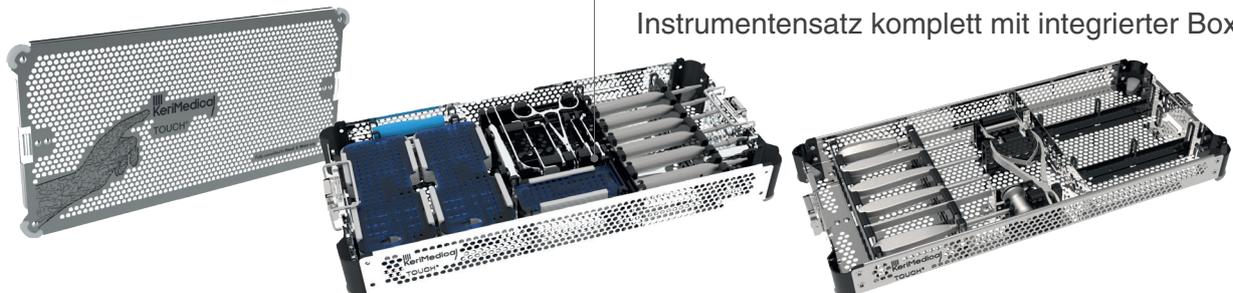

CE

+ TOUCH®

Instrumentensatz komplett mit integrierter Box

Die **+** TOUCH®

Die erste

Duo-Mobile-Prothese mit hochvernetztem PE

Die erste

Prothese auf dem Markt, die eine sphärische und konische Pfanne anbietet

144

mögliche Kombinationen ermöglichen eine optimale und patienten-individuelle Anpassung

KeriMedical SA Schweiz (Hauptsitz)
Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS Frankreich
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - Frankreich
Tel: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch: