



## KeriFlex®

Fingergelenkimplantate  
aus Silikon

PIP - MCP




Fully committed to **Hand & Wrist** only

[www.kerimedical.com](http://www.kerimedical.com)


# KeriFlex®

Fingergelenkimplantate aus Silikon  
PIP - MCP

Ersetzt Gelenke, die von rheumatoider Arthritis, Osteoarthritis oder traumatischer Arthritis betroffen sind

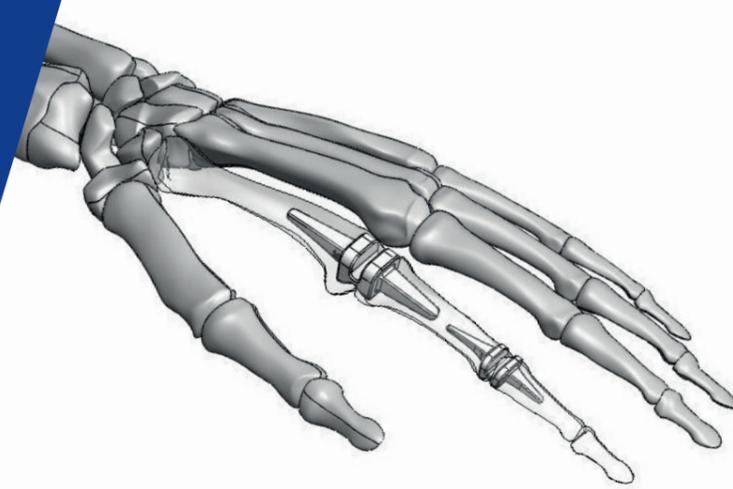

Labor-Test

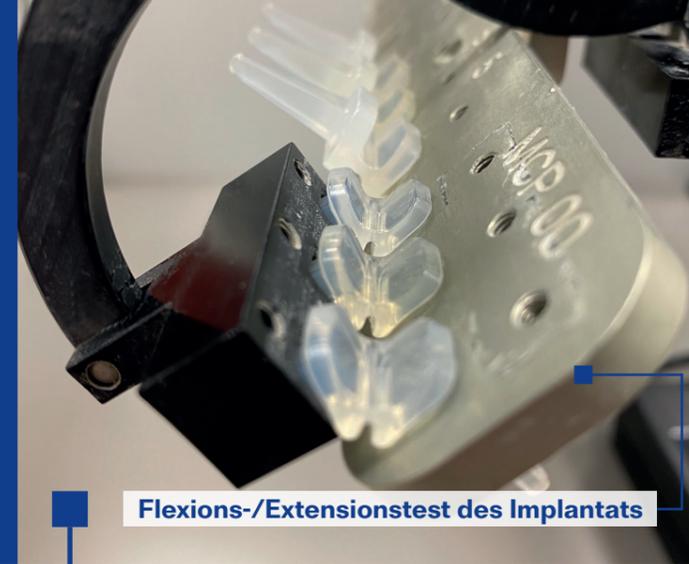

Flexions-/Extensionstest des Implantats

DESIGN & WIDERSTANDSFÄHIGKEIT  
VERIFIZIERT

- Vollständige Flexion/Extension (0° - 90°)
- Validierte Beständigkeit bis zu 10 Millionen Zyklen (Testlabor)
- Berücksichtigung der Gelenkwinkel im Ruhezustand: PIP 15° und MCP 30°

+ KOMFORT

+ STABILITÄT

KeriFlex®-Implantate sorgen für Festigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit


Die neue Generation von Fingergelenkimplantaten

Medio-laterale Stabilität und Gelenkbeweglichkeit

Medizinisches Hochleistungssilikon für hohe mechanische Widerstandsfähigkeit gegen physiologische Belastungen

Komplettes Größensortiment für alle anatomischen Bedürfnisse

MEDIZINISCHES, BIOKOMPATIBLES SILIKON

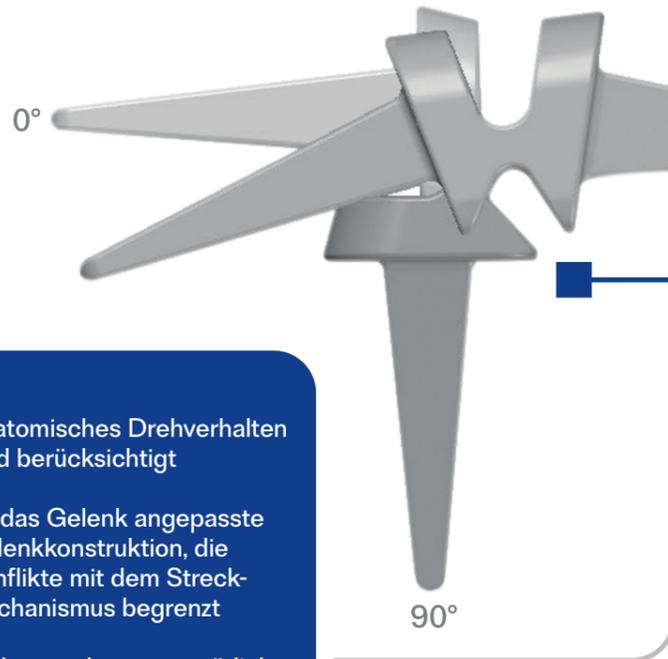


- Anatomisches Drehverhalten wird berücksichtigt
- An das Gelenk angepasste Gelenkkonstruktion, die Konflikte mit dem Streckmechanismus begrenzt
- Widerstand gegen natürliche Druckspannung des Gelenks

12 GRÖSSEN VERFÜGBAR


PIP

5 Implantatgrößen

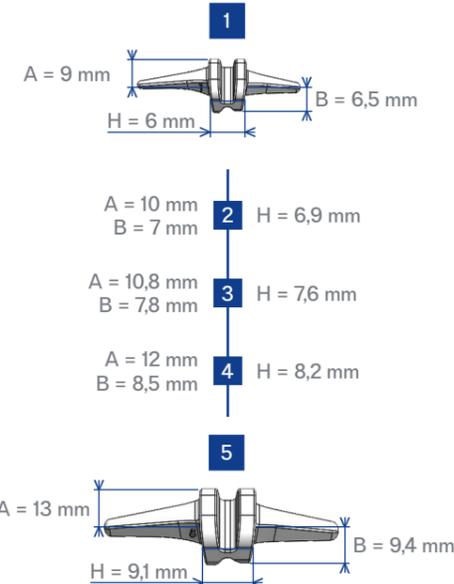

MCP

7 Implantatgrößen

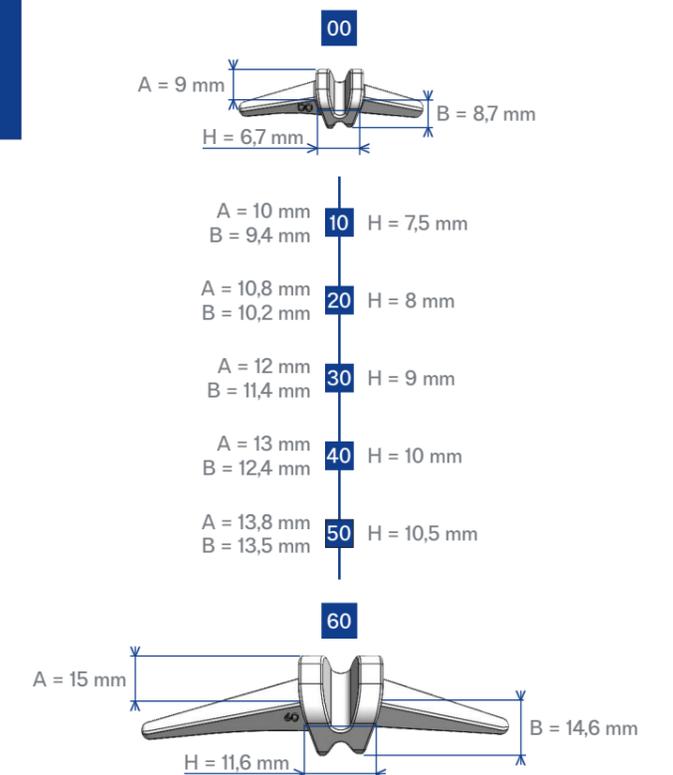

## OPTIMIERTE & AUFEINANDER ABGESTIMMTE INSTRUMENTE


### Instrumente

2 Raspeln, progressiv je Indikation



Validierter Sterilisationszyklus 134°/18 min und 134°/3 min gemäß ANSI/AAMI ST79 und EN ISO 17665


### PIP Instrumente

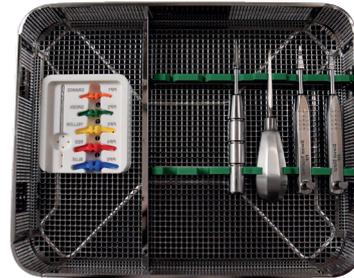



Bohrer, konisch (standardmäßig)



### MCP Instrumente

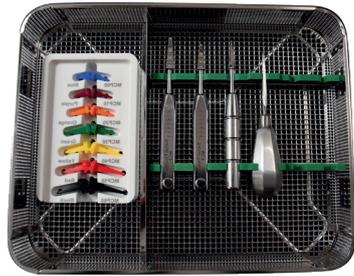

### PIP + MCP Instrumente

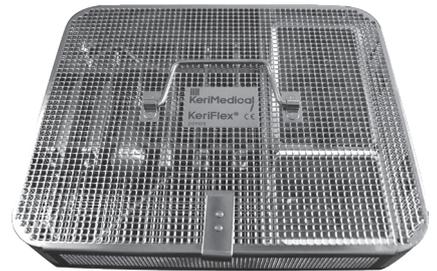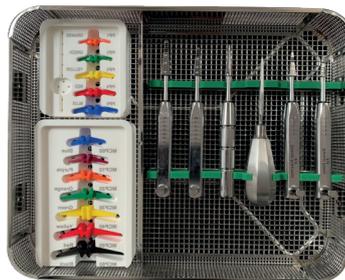

## BESTELLINFORMATION

### PIP Implantate

#### Katalog

Artikelnummer	Bezeichnung	Probeimplantate
210-P20001	KeriFlex PIP 1	Orange
210-P20002	KeriFlex PIP 2	Grün
210-P20003	KeriFlex PIP 3	Gelb
210-P20004	KeriFlex PIP 4	Rot
210-P20005	KeriFlex PIP 5	Blau

### MCP Implantate

#### Katalog

Artikelnummer	Bezeichnung	Probeimplantate
210-P10000	KeriFlex MCP 00	Blau
210-P10010	KeriFlex MCP 10	Lila
210-P10020	KeriFlex MCP 20	Orange
210-P10030	KeriFlex MCP 30	Grün
210-P10040	KeriFlex MCP 40	Gelb
210-P10050	KeriFlex MCP 50	Rot
210-P10060	KeriFlex MCP 60	Schwarz



**KeriMedical SA**  
Schweiz (Hauptsitz)  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genf - Schweiz  
Tel: +41 58 255 01 30  
Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

**KeriMedical SAS**  
Frankreich  
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro  
74160 Archamps - Frankreich  
Tel: +33(0)4 50 85 36 10  
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10  
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch:

