

Ancre de suture

Réinsertion ligamentaire
et tendineuse

Pour la main et le poignet

KeriFix[®]



KeriLock[®]





Ancre de 1mm
pour une surface d'ACCROCHE OPTIMALE

Design atraumatique

Forme d'ailettes plates pour une meilleure accroche

Alliage Nitinol super élastique

Kit Complet - Ancre Stérile

Prêt à suturer

1 ANCRE - 2 FILS AU CHOIX

Pour de nombreuses indications Main et Poignet (cf. notice d'utilisation)



Pas de moteur nécessaire
Aucun ancillaire à stériliser
Libération du fil facilitant la suture



- Ancre pré-montée sur son support
- Ancillaire de pré-perçage inclus
- Ancre de suture mini 2.0 ou micro 4.0
- Fil KeriFiber



FIL PROTÉGÉ à l'intérieur de l'ancre évitant tout cisaillement

FILETAGE «SPONGIEUX» pour une surface d'accroche maximale

4 filets / Ø de perçage 1,6 mm
Alliage de Titane

Pose en 4 étapes

CE 1250

CE 1250




1. Perçage Ø 2 mm

2. Positionnement de l'ancre

3. Impaction de l'ancre, ailettes fermées

4. Libération du fil de suture et des aiguilles à distance du site

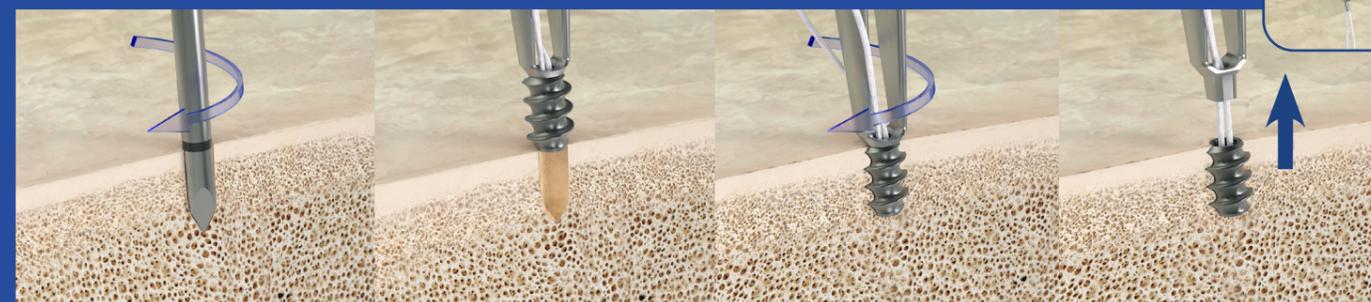

1. Perçage Ø 1,6 mm

2. Positionnement de l'ancre

3. Vissage de l'ancre

4. Libération du fil de suture et des aiguilles

KeriFix® Ancre impactée



KeriFix®		Référence	Suture
Mini	Nitinol	500-B10001	KeriFiber #2.0 (PE) 18" (45 cm), 2 aiguilles, 3/8C, 16 mm, rond
Micro	Nitinol	500-B10002	KeriFiber #4.0 (PE) 18" (45 cm), 2 aiguilles, 3/8C, 13 mm, rond

CE 1250

KeriLock® Ancre vissée



KeriLock®		Référence	Suture
Mini	Alliage de titane	500-B20001	KeriFiber #2.0 (PE) 18" (45 cm), 2 aiguilles, 3/8C, 16 mm, rond
Micro	Alliage de titane	500-B20002	KeriFiber #4.0 (PE) 18" (45 cm), 2 aiguilles, 3/8C, 13 mm, rond

CE 1250

KeriMedical SA
Suisse (Siège Social)
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS
France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Distribué par :



**KeriMedical**