



KeriFlex®

Fingergelenkimplantate
aus Silikon

PIP - MCP




Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com


KeriFlex®

Fingergelenkimplantate aus Silikon
PIP - MCP

Ersetzt Gelenke, die von rheumatoider Arthritis, Osteoarthritis oder traumatischer Arthritis betroffen sind

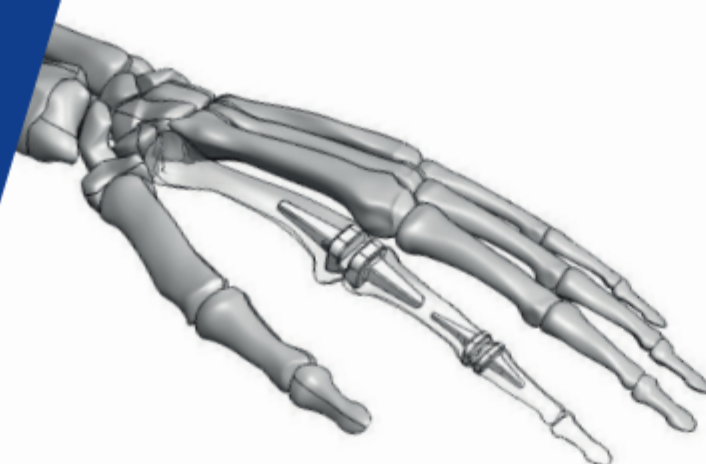

Labor-Test

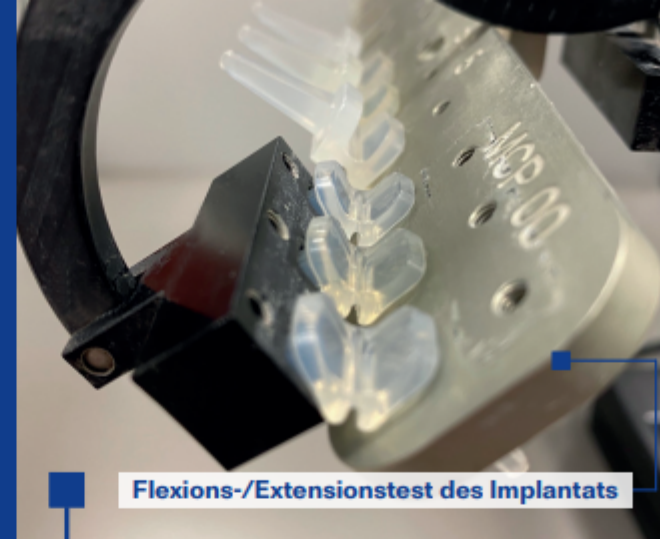


Flexions-/Extensionstest des Implantats

DESIGN & WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERIFIZIERT

- Vollständige Flexion/Extension (0° - 90°)
- Validierte Beständigkeit bis zu 10 Millionen Zyklen (Testlabor)
- Berücksichtigung der Gelenkwinkel im Ruhezustand: PIP 15° und MCP 30°

PIP 0

An kleine Morphologien
angepasste Grösse

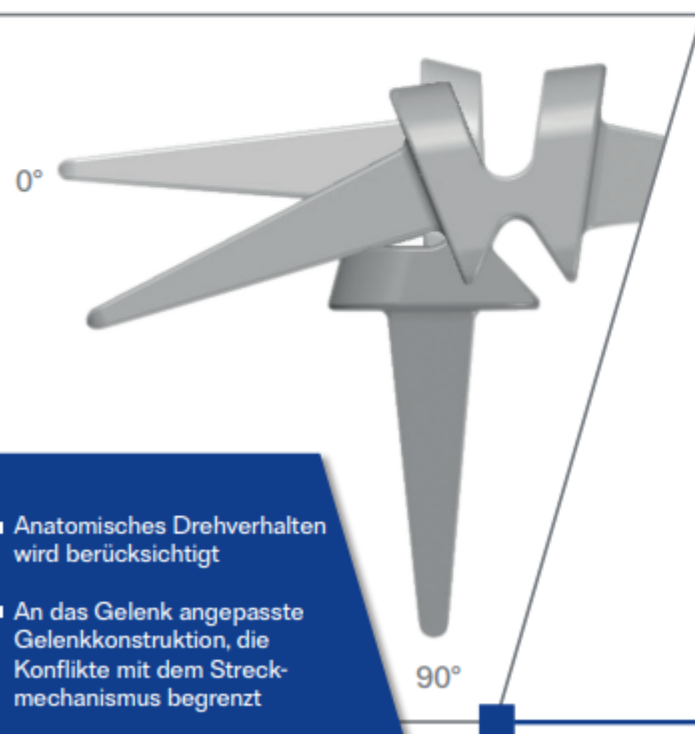

- Anatomisches Drehverhalten wird berücksichtigt
- An das Gelenk angepasste Gelenkkonstruktion, die Konflikte mit dem Streckmechanismus begrenzt
- Widerstand gegen natürliche Druckspannung des Gelenks

Die neue Generation
von Fingergelenkimplantaten

■■■■

KeriFlex®-Implantate sorgen
für Festigkeit, Flexibilität
und Langlebigkeit

■■■■

Medio-laterale Stabilität
und Gelenkbeweglichkeit

■■■■

Medizinisches
Hochleistungssilikon
für hohe mechanische
Widerstandsfähigkeit
gegen physiologische
Belastungen



13 GRÖSSEN VERFÜGBAR

PIP - 6 Implantatgrößen

■■■■

MCP - 7 Implantatgrößen

■■■■

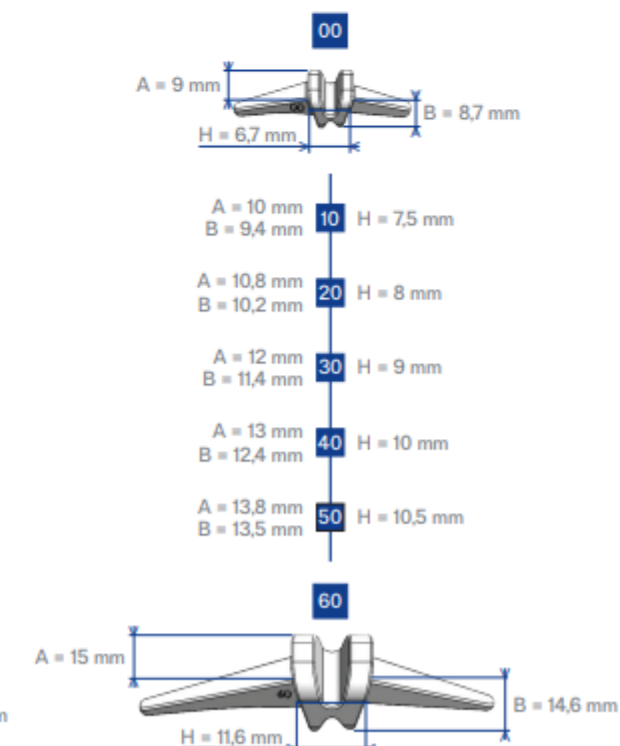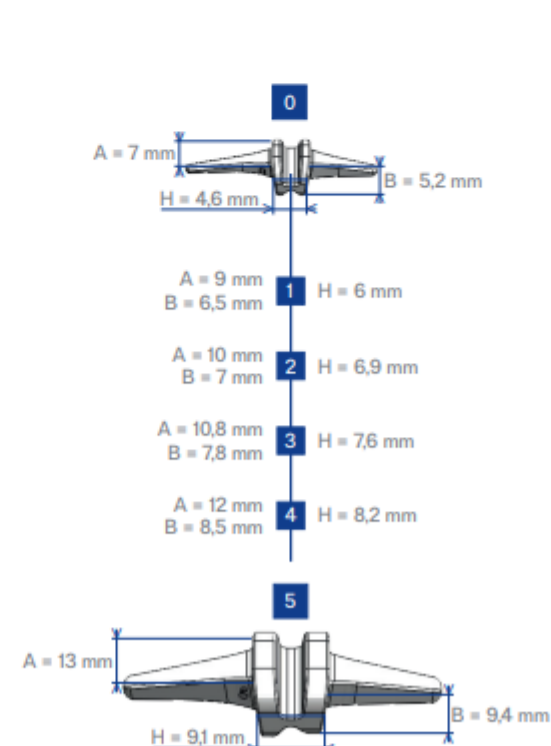

■■■■


OPTIMIERTE & VEREINFACHTE INSTRUMENTE

Instrumente


2 Raspeln, progressiv je Indikation




Set PIP

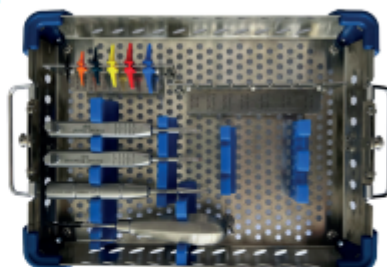

Set MCP

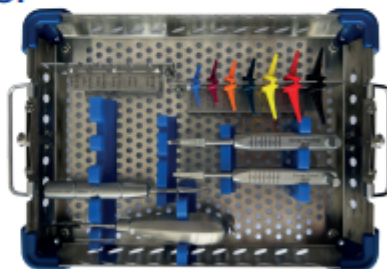

Set PIP + MCP

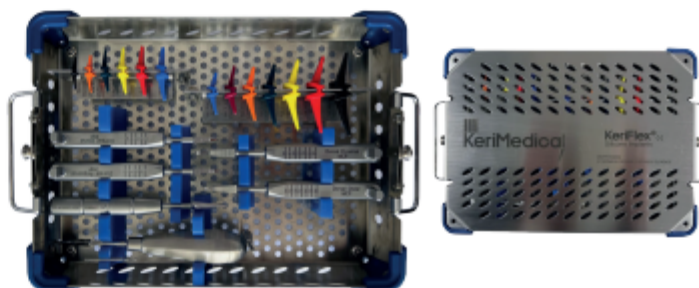

Validierter Sterilisationszyklus 134°/18 min
und 134°/3 min gemäß ANSI/AAMI ST79
und EN ISO 17665

BESTELLINFORMATION

PIP Implantate

Katalog

Artikelnummer	Bezeichnung	Probeimplantate
210-P20000	KeriFlex PIP 0	● Schwarz
210-P20001	KeriFlex PIP 1	● Orange
210-P20002	KeriFlex PIP 2	● Grün
210-P20003	KeriFlex PIP 3	● Gelb
210-P20004	KeriFlex PIP 4	● Rot
210-P20005	KeriFlex PIP 5	● Blau

MCP Implantate

Katalog

Artikelnummer	Bezeichnung	Probeimplantate
210-P10000	KeriFlex MCP 00	● Blau
210-P10010	KeriFlex MCP 10	● Lila
210-P10020	KeriFlex MCP 20	● Orange
210-P10030	KeriFlex MCP 30	● Grün
210-P10040	KeriFlex MCP 40	● Gelb
210-P10050	KeriFlex MCP 50	● Rot
210-P10060	KeriFlex MCP 60	● Schwarz



KERI MEDICAL SA

Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KERI MEDICAL FRANCE

34 rue Antoine Redier
74160 Archamps - Frankreich
Tel: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch:

