



KeriSafe

Gamme de couteaux &
d'instruments à usage unique



L'assurance . . .

- d'une coupe régulière guidée
- de la maîtrise du geste lors de la section du ligament
- de la protection du nerf médian
- de la protection de l'arcade palmaire



KeriKnife™
Couteau chirurgical & guide



KeriKnife™ Mini
Mini couteau chirurgical

Fully committed to **Hand & Wrist** only


www.kerimedical.com

KeriKnife™


Couteau chirurgical & guide

à usage unique, pour la libération du **Canal Carpien**

Couteau chirurgical & guide spécialement développés pour l'*Echochirurgie*



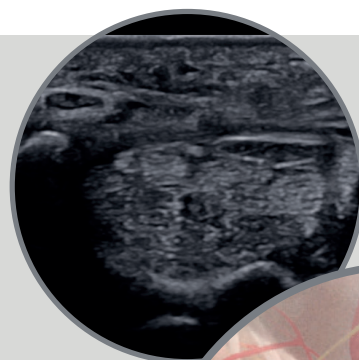


Visualisation optimale
sous échographie

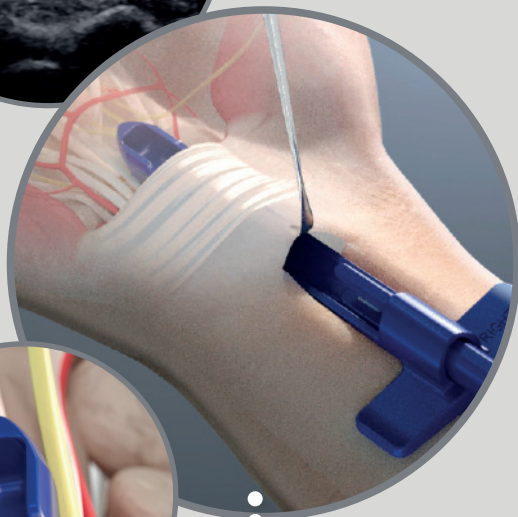

Sécurité sous échographie
avec coupe régulière & maîtrisée

Design et affûtage de la lame
spécifiquement travaillés pour sectionner le ligament
annulaire antérieur du carpe quelle que soit son épaisseur

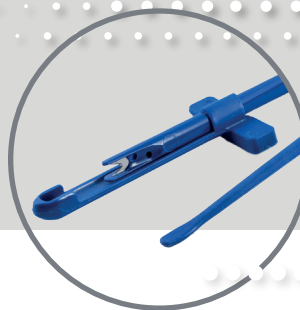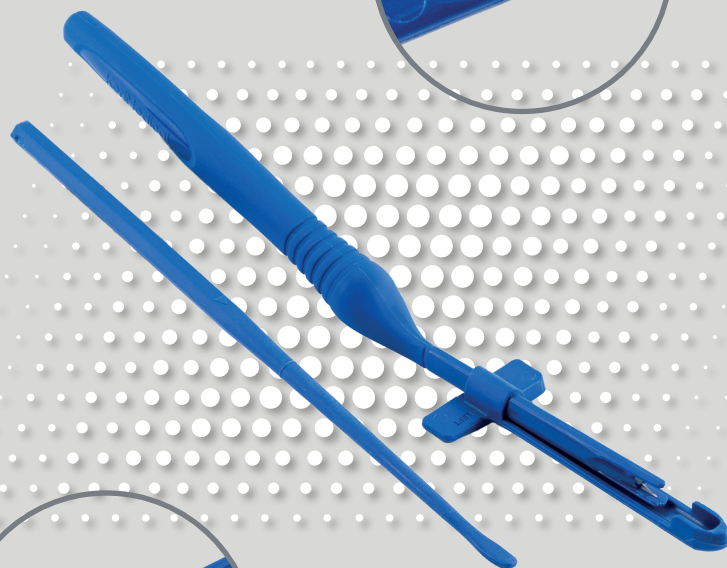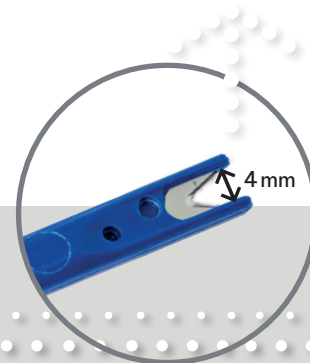

Kit stérile

Pour une préparation et libération complète du ligament annulaire du carpe

Les Plus DE L'INSTRUMENTATION

Guide de coupe incliné, dédié à la main droite ou à la main gauche en fonction de son inclinaison



Guide Droit ou Guide Gauche


Isole le nerf médian de la trajectoire de coupe, favorisant sa protection lors du passage du couteau

Protection du nerf médian



Canule

Guide la trajectoire du couteau pendant sa progression

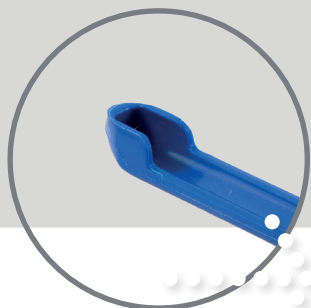

Ogive



Stoppe le couteau en maîtrisant le geste lors de la section du ligament

Protection de l'arcade palmaire

KeriKnife™ Mini

Mini couteau chirurgical

à usage unique, pour l'*Echochirurgie* du Doigt à Ressaut

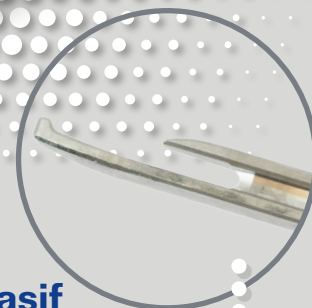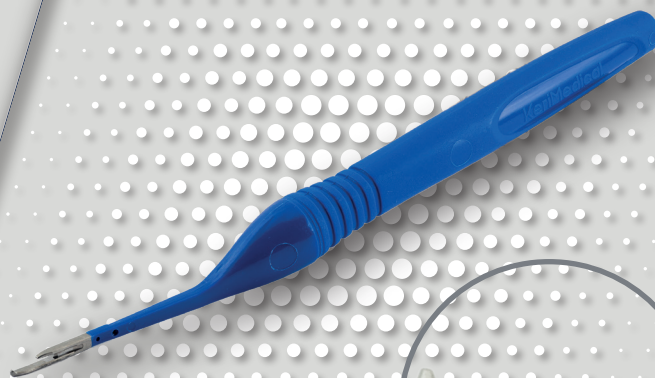

Instrument
ergonomique & mini invasif

Lame visible sous échographie

Spatule inférieure : permet de sectionner uniquement la poulie A1 et de dégager la lame avant la poulie A2

Les Plus DE L'USAGE UNIQUE



Kit à usage unique : minimise les risques de contamination, traçabilité maîtrisée






Prêt à l'emploi et stérile : la solution idéale pour les interventions quotidiennes, sans limitation du nombre d'acte



Solution économique : réduction des coûts liés au service de stérilisation

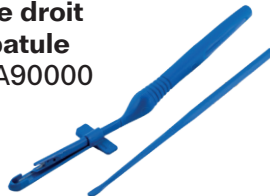

Unité de vente adaptée : conditionnement par 5

| | Catalogue | Unité de vente |
|-----------------|--|----------------|
| Canal carpien | Couteau chirurgical, guide droit et spatule 524-A90000  | 5 |
| | Couteau chirurgical, guide gauche et spatule 524-A91000  | 5 |
| Doigt à ressaut | Mini couteau chirurgical 524-A80000  | 5 |



KERI MEDICAL SA

Route des Acacias, 45a
 1227 Genève - Suisse
 Tél: +41 58 255 01 30
 Fax: +41 58 255 01 40
 customerservice@kerimedical.com



KERI MEDICAL FRANCE

34 rue Antoine Redier
 74160 Archamps - France
 Tél: +33(0)4 50 85 36 10
 Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
 adv@kerimedical.com

